

A person is shown from the side, climbing a rock face. They are wearing a brown t-shirt, dark pants, and a grey and white knit beanie. Their hands are gripping a rock ledge. A climbing rope is attached to their harness and runs down the wall. The background is a textured, light-colored rock wall.

BLUEMEDICAL

a wellinq company

SUMMIT

CTO CATHETER


Cross



Cateter Balão para PTCA

As oclusões totais crônicas são o maior desafio enfrentado pelos intervencionistas atualmente, visto que os vasos severamente estenosados necessitam de tratamento e produtos específicos.

O Cateter Balão SUMMIT para PTCA é a melhor opção para o tratamento de CTO. A suprema tecnologia do balão garante o cruzamento da lesão com total confiança.

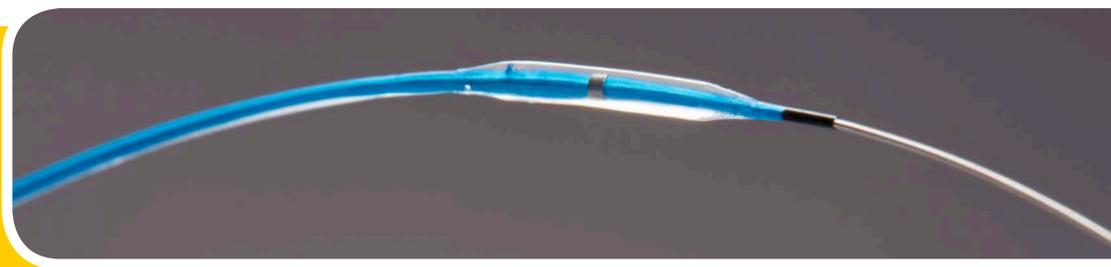

SUMMIT

CTO CATHETER

Cateter Balão para PTCA

Cross

Tracking Ideal

- O menor atrito de fio guia existente no mercado
- Design de cateter longo, capaz de atingir todo o percurso (comprimento útil de 154 cm)

Pushability Insuperável

- Os novos materiais do lúmen, combinam flexibilidade com rigidez para o impulso necessário
- Hipotubo PoleVault™ resistente ao kink
- Revestimento hidrofílico em todo o comprimento até a ponta, incluindo a área do balão
- Nova configuração de rigidez do fio, permitindo maior poder de pushability

Cruzabilidade

- Ponta estreita e de baixo perfil sobre o fio
- Perfil de entrada da ponta: 0.016" (0.40 mm)
- Perfil distal do balão: 0.024" (0.62mm)
- Design da ponta e do balão em "wig shape"

Insuflação e Desinsuflação Seguras

- Baixo tempo de insuflação e desinsuflação
- Ruptura nominal de 15 atm



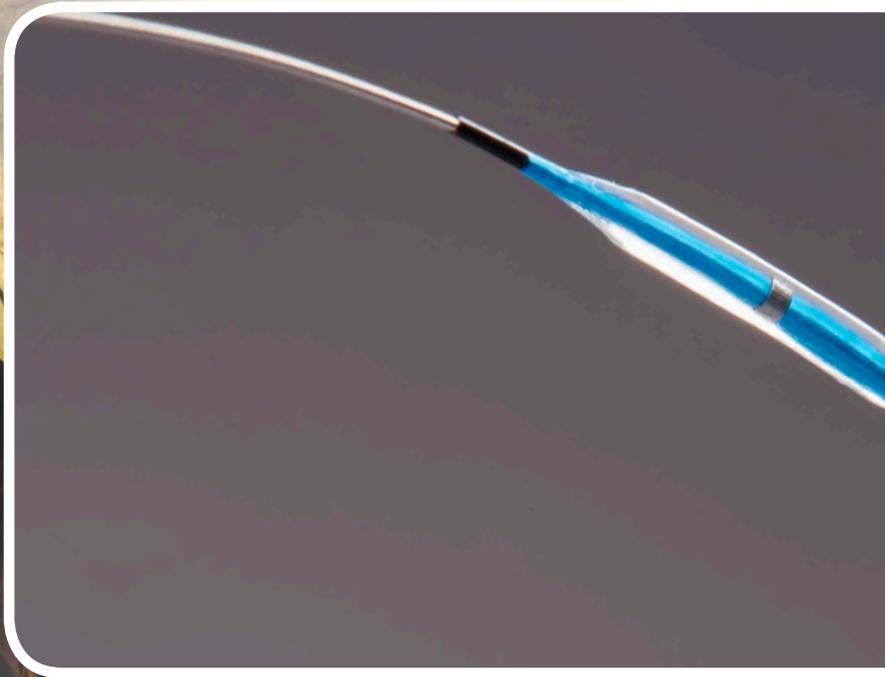




TABELA DE COMPLACÊNCIA DO CATETER BALÃO

Pressão (bar)*	Ø 1.1 (mm)	Ø 1.25 (mm)	Ø 1.5 (mm)
5	1.14	1.28	1.52
6	1.18	1.33	1.57
7	1.22	1.36	1.60
8	1.27	1.40	1.63
9	1.30	1.43	1.66
10	1.33	1.46	1.68
11	1.35	1.48	1.70
12	1.37	1.50	1.72
13	1.40	1.52	1.73
14	1.42	1.54	1.75
16	1.49	1.59	1.79
17	1.53	1.62	1.81
18	1.57	1.65	1.83
19	1.61	1.68	1.85
20	1.64	1.71	1.87

NP: Pressão Nominal RBP: Pressão de Ruptura Nominal.
Não exceder

1 bar = 100kPa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SUMMIT
C/O CATHETER


Pressão nominal:	4 bar
Pressão de ruptura nominal:	15 bar
Material do balão:	Poliamida de seda semi-complacente para dimensões controladas
Dobrabilidade:	2 dobras
Cateter guia compatível:	5F (DI min 0.056"/1.42 mm)
Fio guia compatível:	Máx 0.014" (0.36 mm)
Sistema:	Troca rápida
Shaft proximal:	1.9F (0.64 mm)
Shaft distal:	2.6F (0.86 mm)
Perfil de entrada na lesão:	0.016" (0.40 mm)
Comprimento útil do cateter:	154 cm
Tempo de deflação:	~ 1 segundo
Ponta cônica:	3 mm
Revestimento do shaft:	Revestimento hidrofílico

SUMMIT
CTO CATHETER

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

		Diâmetro (mm)		
L		1.10	1.25	1.50
Comprimento (mm)	10	Sum1110	Sum1210	Sum1510
	15	Sum1115	Sum1215	Sum1515
	20	Sum1120	Sum1220	Sum1520

Descrição – Informações para Pedido: SUM DDLL (D=Diâmetro, L=Comprimento)

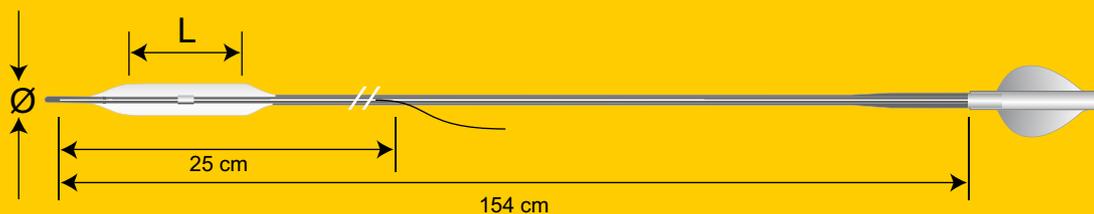

BLUEMEDICAL

a wellinq company

BLUE MEDICAL DEVICES B.V., PANOVENWEG 7, 5708 HR HELMOND, HOLANDA
TELEFONE: +31 (0)850 073 000, E-MAIL: CS@BLUEMEDICAL.COM, WWW.WELLINQ.COM

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

LINELIFE

Indicações, contra-indicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto.
ATENÇÃO: A lei federal norte-americana restringe a venda desse dispositivo a médicos ou a pedido de um médico.

w
wellinq[®]
vascular innovations